

GALAXIA

HOSPITALIZACIÓN



Ref.3156



Una cama segura, cómoda y funcional, diseñada para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en unidades de hospitalización.



@mubimedical
www.mubimedical.com



Superficie de paciente:
compuesto por 4
secciones: 1 fijo y 3
móviles, desmontables
fabricados en ABS de alto
impacto facilitando la
limpieza y desinfección.



Colchón clínico:

Ayuda en el tratamiento y
prevención de las lesiones
por presión, fabricado en
espuma de poliuretano de
alta densidad. Con
cubierta en tela libre de
látex y ignífuga y
antibacterial. **Accesorio
opcional***



Porta suero graduable:
con ganchos de doble
servicio en polímero de
alto impacto. Capacidad
de 8kg.



Cabecero y piecero:

Fabricados en polímero
ABS de alta resistencia,
desmontables con pin
de seguridad, de fácil
limpieza y desinfección.



Barandas de seguridad:
Fabricadas en polímero de alto impacto (ABS) asistidas por amortiguador, facilita el acceso del paciente.



Manija accionamiento:
Permite al personal asistencial llevar la cama en diferentes posiciones.



Ruedas y bloqueo:
Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad en la entrada y salida del paciente.

Características estándar

Capacidad de carga segura 180 kg.
Tendido en polímero ABS.
Cabecero y piecero desmontables en polímero ABS.
Retenedores de colchón en espalda y pies.
Soportes para correas de sujeción en tórax y pies.
Soportes para bolsa de drenaje.
Barandas laterales de seguridad de doble sección.
Ruedas en poliuretano de 6" libres de mantenimiento.
Sistema de bloqueo en cada rueda.
Porta suero telescópico en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricados en polímero.
Soportes para porta suero en las esquinas de la cama.

Dimensiones externas

Largo 83" = 211 cm
Ancho 41" = 105 cm
Barandas 11" X 28" = 28cm X 72 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.

Superficie de paciente

Largo 74.8" = 190 cm
Ancho 35" = 90 cm

Accesorios opcionales

Soporte porta historias
Soporte para sábanas
Mesa porta monitor
Porta suero inoxidable extra
Soporte tanque de oxígeno vertical

Movimientos


Flexión espalda $0^\circ - 74^\circ$
Flexión rodillas $0^\circ - 40^\circ$
Altura mínima 18" = 46 cm
Altura máxima 24" = 62 cm

Movimientos de espalda, pies y altura realizados por tornillo sin fín asistidos por medio de manigueta retráctil.

Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Opciones de color aplique cabecero/piecero

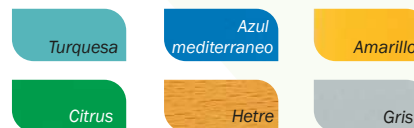

Nota

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá - Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999