

QUAXAR

HOSPITALIZACIÓN



Ref.356001



Una cama segura, cómoda y funcional, diseñada para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en Hospitalización.



@mubimedical
www.mubimedical.com



Porta suero graduable:
con ganchos de doble
servicio en polímero de alto
impacto. Capacidad de 8kg.



Cabecero y piecero:

Fabricados en polímero
ABS de alta resistencia,
desmontables con pin de
seguridad, de fácil
limpieza y resistentes a la
desinfección.



Superficie de paciente:
compuesto por 4
secciones: 1 fijo y 3
móviles, desmontables
fabricados en ABS de alto
impacto, facilitando la
limpieza y desinfección.

Colchón clínico:

Ayuda en el tratamiento y
prevención de las lesiones por
presión, fabricado en espuma de
poliuretano de alta densidad, con
cubierta en tela libre de látex,
ignífuga y antibacterial.

Accesorio opcional*





Autocontorno: Lleva la cama a posición semi sentado brindando al paciente confort.




Barandas de seguridad cubrimiento total: laterales fabricadas en polímero de alto impacto (ABS) asistidas por amortiguador neumático para mayor protección contra caídas, facilita el acceso del paciente.



Ruedas y bloqueo: Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad en la entrada y salida del paciente.

Luz penumbra: Con un solo toque, los pacientes encienden una luz para ayudarles a salir de la cama, disminuyendo posibles accidentes en las noches.



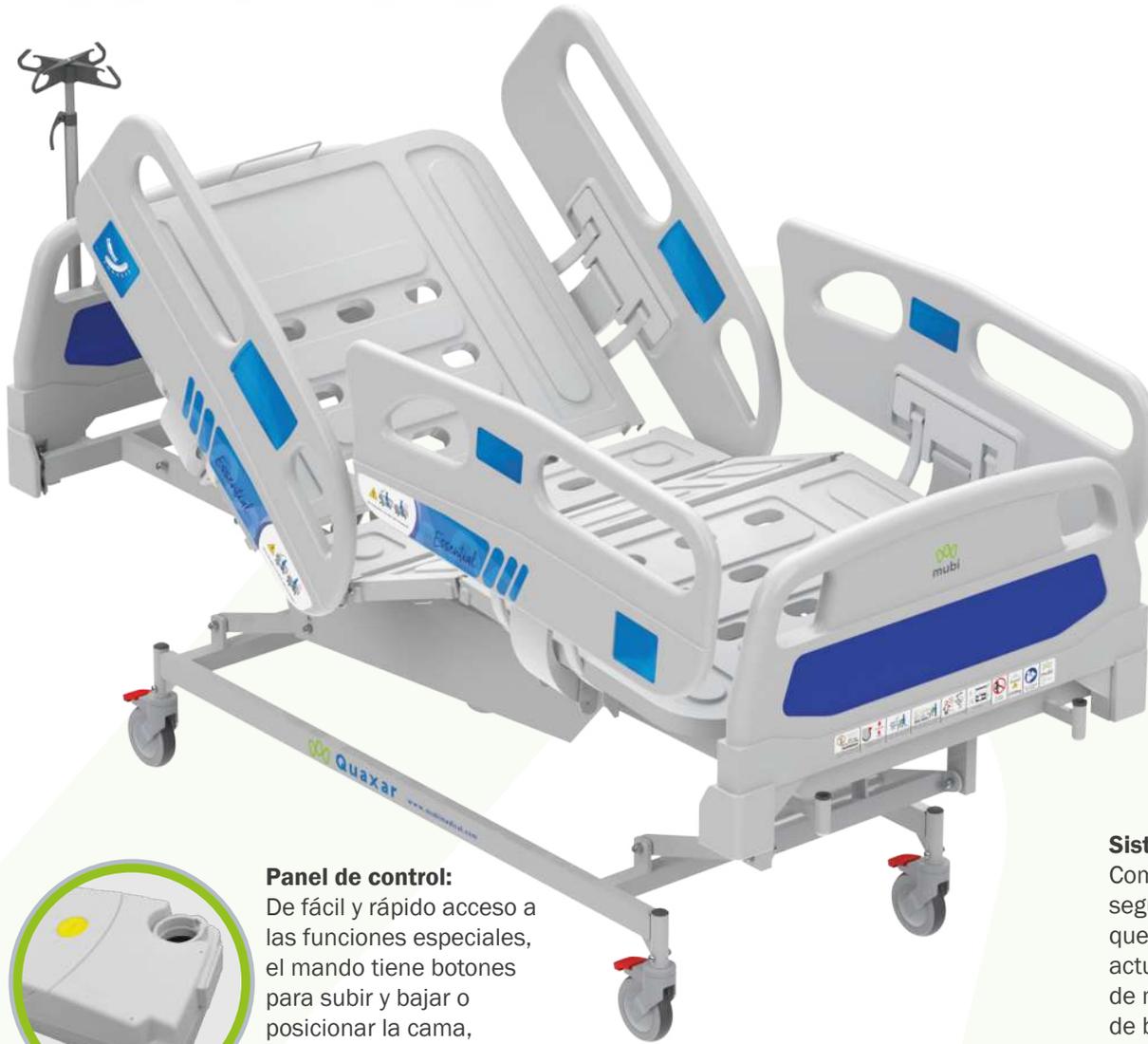

Indicadores de ángulo:

Integrados en las barandas permite conocer el ángulo de inclinación de espalda.



Sistema de control:

Comunicación eficiente y segura, ahorro de energía que soportan los actuadores eléctricos libres de mantenimiento, respaldo de batería en caso de fallos del sistema eléctrico.



Panel de control:

De fácil y rápido acceso a las funciones especiales, el mando tiene botones para subir y bajar o posicionar la cama, facilitando el trabajo del personal asistencial.

Sistemas Electrónicos

* Los productos MUBI cuentan con sistemas electrónicos CLASE II, es decir, no requieren tierra física para su operación segura, ya que la seguridad del operador y del paciente reside en el doble aislamiento de la fuente de alimentación y no en la puesta a tierra. No requiere conexión a tierra funcional.

**La calidad de la energía de la red eléctrica debe cumplir con la reglamentación vigente según el país y el uso previsto (hospitalario), y para tal fin, el estándar mundialmente adoptado es IEEEE519, que define la calidad de la energía que debe existir en el punto de conexión de los dispositivos de red eléctrica.

*** Los sistemas electrónicos de los productos MUBI cuentan con una fuente de alimentación conforme con la normativa de compatibilidad electromagnética (cableada y radiada) definida por la norma IEC60601-1, donde se resalta la familia de normas IEC61000-4, y se define la inmunidad contra perturbaciones conducidas, transitorios de sobretensión, caídas, interrupciones y bajas de voltaje entre otras.

Indicadores de estado



Actividad



Indicador visual carga

Control eléctrico manual:

Para uso del personal médico; permite ejecutar las funciones de la cama. Además de funciones específicas como: CRP, bloqueo de funciones y posición automática de espalda y pies con sólo pulsar un botón.



Características estándar

Capacidad de carga segura 220 kg.
Tendido en polímero ABS.
Cabecero y piecero desmontables en polímero ABS.
Sujetadores de colchón en espalda y pies.
Soportes para correas de sujeción en los tendidos.
Soportes para bolsa de drenaje.
Barandas laterales de seguridad de cubrimiento total en polímero ABS con indicador de grados incorporado.
Ruedas en poliuretano de 5" libres de mantenimiento.
Sistema de bloqueo en cada rueda.
Porta suero telescópico en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricados en polímero.
Soportes para porta suero en las esquinas de la cama.

Dimensiones externas

Largo 82.6" = 215 cm
Ancho 40.5" = 201 cm
Espaldar 14,6" X 37,4"= 3 cm X 95 cm
Piernas 14,6" X 39"= 37cm X 99 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones $\pm 3cm$.

Superficie de paciente

Largo 74.8" = 190 cm
Ancho 35,4" = 90 cm

Opciones de color aplique cabecero/piecero



Opciones de color aplique paneles decorativos



Movimientos

Flexión espalda 0° - 70°
Flexión rodillas 0° - 40°
Altura mínima 17.7" = 45 cm
Altura máxima 29.9" = 76 cm

Movimientos realizados por control eléctrico manual.
Batería de respaldo integrada.
Actuadores eléctricos (libres de mantenimiento).

Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Accesorios opcionales

Soporte porta historias
Soporte para sábanas
Porta suero inoxidable extra
Soporte tanque de oxígeno (horizontal ó vertical)

Notas

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

**** Si en la red eléctrica donde se van a instalar los productos MUBI existen problemas de calidad de energía, se recomienda instalar una UPS ONLINE (doble conversión) dimensionada apropiadamente, considerando 300VA por dispositivo (cama, camilla, silla multipropósito), y evaluar adicionalmente con el equipo de mantenimiento e infraestructura de la institución otros mecanismos de mitigación de problemas de calidad de energía.

*****Si la red eléctrica, a la cual está conectado el dispositivo MUBI, excede los límites de los parámetros de calidad eléctricos definidos por la IEE519 y/o las normas aplicables, pueden ocurrir daños permanentes al equipo (cama, camilla, silla multipropósito), los cuales NO serán cubiertos por la garantía.



@ m u b i m e d i c a l - info@mubimedical.com - www.mubimedical.com

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá – Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999