

SILLAS Y MUEBLES

SILLA HOSPITALARIA



Silla Hospitalaria Syriux de multifuncionalidad, seguridad y diseño que se unen en el complemento médico para la atención de pacientes.



@mubimedical
www.mubimedical.com

Ref.4318



Manija accionamiento:

Permite al personal asistencial llevar la silla en diferentes posiciones.



Apoya brazos:

Comodidad y confort para la atención de los pacientes.




Ruedas y bloqueo:

Traslados suaves y seguros, gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad en la entrada y salida del paciente.




Manija accionamiento apoya brazos:

Permite al personal asistencial llevar los apoya brazos en diferentes posiciones y/o bloquear.

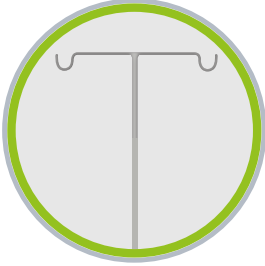

Porta suero fijo:
Desmontable, con gancho de servicio y capacidad de 8 kg.

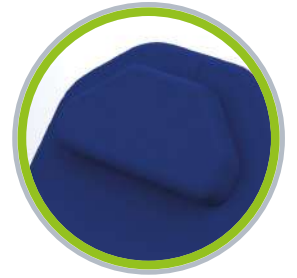

Reposa cabeza ajustable:
Comodidad y confort para la atención de los pacientes.



Manillar de empuje y porta rollo

Características estándar

Accionamiento de movimientos por medio de manija

Porta suero fijo inoxidable

Apoya brazos laterales, soporte porta rollo

Ruedas en poliuretano libres de mantenimiento

Sistema de bloqueo en cada rueda

Tapizado en vinilo con protección antibacterial

Estructura fabricada en acero de alta resistencia

Acabado pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electro estática

Especificaciones técnicas

Movimientos

Espaldar	78°
Pieceros	-46°
Silla	--

Capacidad de carga 180 kg

Altura total 57 cm

Dimensiones

Ancho externo 83 cm

Superficie de paciente

Largo 200 cm

Ancho 55 cm

Diámetro ruedas 4" (10.16 cm)

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.

Opciones de color tapizado



@mubimedical
www.mubimedical.com
info@mubimedical.com

*mubi se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 28/09/2021
-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------