

HYDRUX

RECUPERACIÓN



Ref. 4422




UNA CAMILLA SEGURA, CÓMODA Y FUNCIONAL diseñada para apoyar las funciones del personal asistencial en tratamiento, examinación, recuperación y transporte de pacientes en unidades de hospitalización, trauma, emergencias, consultorios y post operatorios.



@mubimedical
www.mubimedical.com



Superficie de paciente:
compuesto por 4 secciones: 1 fijo y 3 móviles, fabricados en lámina de acero de alta resistencia, con cubierta de pintura epóxica facilitando limpieza y desinfección.

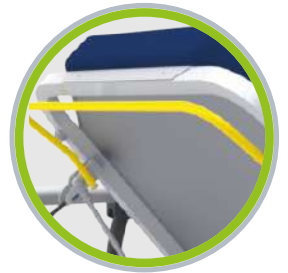


Ajuste de espaldar:
accionamiento fácil, ágil y seguro para el personal asistencial.



Asa de empuje: Asas de empuje ergonómicas para un transporte rápido y fácil del paciente.



Barandas de seguridad:
Cubren la mayor parte de la superficie del paciente reduciendo los riesgos de caída, el sistema de plegado suave permite un fácil acceso al paciente.

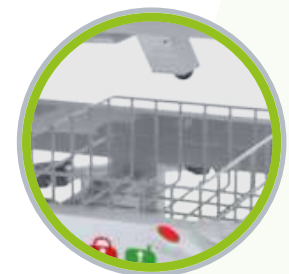


Canastilla auxiliar inferior.

HYDRUX

RECUPERACIÓN




mubi
MEDICAL

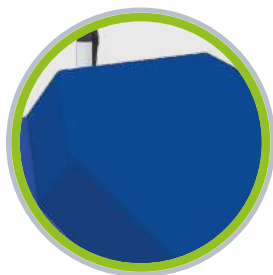


Colchoneta: fabricada en espuma de poliuretano alta densidad 8 cm de espesor con cubierta anti bacteriana e ignífuga para mayor seguridad, higiene y comodidad.

Porta suero graduable: en polímero de alto impacto, desmontable, 2 ganchos de doble servicio para bolsa de soluciones, capacidad de 8 kg.

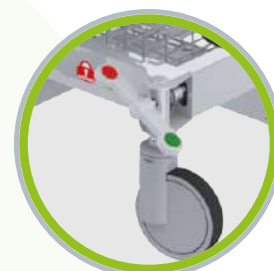

Ruedas y bloqueo central: traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo central que evita riesgos de caída durante la entrada y salida del paciente.

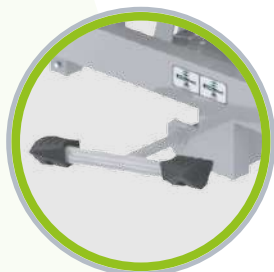

Ajuste de altura.



Ajuste de trendelenburg e inverso: Accionamiento fácil, ágil y seguro para el personal asistencial.

Características estándar

Capacidad de carga segura 180 kg.
Espaldar neumático.
Accionamiento de altura por pedales.
Porta suero graduable inoxidable.
4 soportes porta suero.
Barandas de seguridad plegable.
Accionamiento de movimiento por medio de manijas.
Ruedas libres de mantenimiento.
Pedales de bloqueo central.
Soportes correas de sujeción.
Soportes bolsa de drenaje.
Ruedas parachoques.
Canastilla inferior auxiliar.
Acabado pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electro estática.

Dimensiones externas

Largo 83.8" = 213 cm
Ancho 32.6" = 83 cm
Barandas 14.9" X 59.8" = 38 cm X 152 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.

Superficie de paciente

Largo 74.8" = 190 cm
Ancho 26.3" = 67 cm

Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Movimientos

Flexión espalda	0° - 80°
Trendelenburg	17°
Trendelenburg inverso	-17°
Pies	0° - 30°
Altura mínima	31.4" = 52 cm
Altura máxima	20.4" = 80cm

Movimientos de espalda y trendelenburg e inverso realizados por sistema neumático.

Movimiento de pies por medio de tornillo sin fín.

Movimiento de altura por sistema de pedales.

Accesorios opcionales

Mesa de servicio.
Mesa porta monitor con soporte porta historias clínica.
Soporte porta rollo de tela quirúrgica.
Porta suero desmontable y graduable.
Soporte tanque de oxígeno (horizontal ó vertical).

Notas

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

Opciones de color colchoneta



TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá – Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999