

CAMILLAS

HOSPITALARIAS



Ref. 4424



UNA CAMILLA SEGURA, CÓMODA Y FUNCIONAL para apoyar las funciones del personal asistencial y la recuperación de los pacientes.




@mubimedical
www.mubimedical.com



Ajuste de espaldar:
Accionamiento fácil,
ágil y seguro para el
personal asistencial.



**Soporte para
placas de
rayos X**

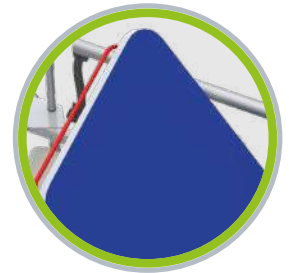

Superficie de paciente:
compuesto por 4 secciones: 1 fijo y
3 móviles, fabricados en acrílico
radio lúcido permite, tomar rayos-X
de tórax en posición vertical,
ahorrando tiempo y reduce el
riesgo de lesiones. facilitando la
limpieza y desinfección.




Quinta rueda retráctil:
Mejora la maniobrabilidad
tanto en trayectorias rectas
como en curvas, evitando el
riesgo de colisión.



Asa de empuje: Asas de
empuje ergonómicas para
un transporte rápido y fácil
del paciente.



Porta suero graduable:
Porta suero graduable, con ganchos de doble servicio en polímero de alto impacto. Capacidad de 8 kg.

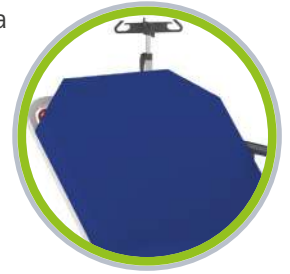

Colchoneta: Fabricada espuma de alta densidad con cubierta anti bacteriana e ignífuga para mayor seguridad, higiene y comodidad ayudando en la recuperación de los pacientes, con cubierta en tela libre de látex, ignífuga y antibacterial.



Manija accionamiento:
Permite al personal asistencial llevar la cama en diferentes posiciones.



Barandas de seguridad:
Cubren la mayor parte de la superficie del paciente reduciendo los riesgos de caída, el sistema de plegado suave permite un fácil acceso al paciente.



Soporte tanque de oxígeno: Cubierta inferior adecuada para colocar tanque de oxígeno.



Ruedas y bloqueo central:
Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo central que evita riesgos de caída durante la entrada y salida del paciente.

Características estándar

Capacidad de carga segura 220 kg.
Tendido en acrílico ZR.
Barandilla desmontable en pies.
Soportes para correas de sujeción en los tendidos.
Soportes para bolsa de drenaje.
Ruedas para choques en las esquinas.
Cubierta inferior termoformada adecuada para colocar tanque de oxígeno.
Barandas laterales de seguridad plegables con seguro retráctil y cubierta superior en aluminio de fácil limpieza.
Ruedas en poliuretano de 8" libres de mantenimiento.
Sistema de bloqueo central por pedales en ambos lados de la camilla.
Quinta rueda retráctil.
Porta suero telescópico en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricado en polímero.
Soportes para porta suero en las esquinas de la camilla

Dimensiones externas

Largo 83.8" = 213 cm
Ancho 33" = 85 cm
Barandas 14.9" = 38cm X 59.8" = 152 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.

Superficie de paciente

Largo 74.8" = 190 cm
Ancho 26" = 67 cm

Nota

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

Movimientos

Flexión espalda $0^\circ - 76^\circ$
Flexión rodillas $0^\circ - 40^\circ$
Trendelenburg 16°
Trendelenburg inverso -16°
Altura mínima 24.8" = 63 cm
Altura máxima 37.7" = 96 cm

Movimiento de espalda realizado por sistema neumático.
Movimientos de pies realizados por tornillo sin fin asistidos por maniguetas retráctiles.
Movimientos de altura, trendelenburg, trendelenburg inverso por sistema hidráulico.


Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Accesorios opcionales

Porta suero inoxidable extra
Soporte tanque de oxígeno (horizontal ó vertical)
Mesa porta monitor con soporte para historia clínica.
Soporte porta rollo de tela quiúrgica.

Opciones de color aplique colchoneta

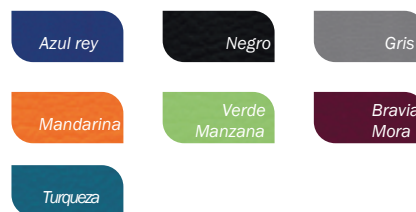

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá - Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999