

# CAMILLAS

HOSPITALARIAS



Ref. 4523



**UNA CAMILLA SEGURA, CÓMODA Y FUNCIONAL** para apoyar las funciones del personal asistencial y la recuperación de los pacientes.



@mubimedical  
www.mubimedical.com



**Superficie de paciente:** compuesto por 2 secciones: 1 fijo y 1 móvil, fabricados en lámina cold rolled facilitando la limpieza y desinfección.




**Asas de empuje:** Asas de empuje ergonómicas para un transporte rápido y fácil del paciente.




**Porta suero graduable:** Porta suero graduable con ganchos de doble servicio en polímero de alto impacto. Capacidad de 8kg.



**Quinta rueda retráctil:** Mejora la maniobrabilidad tanto en trayectorias rectas como en curvas, evitando el riesgo de colisión.

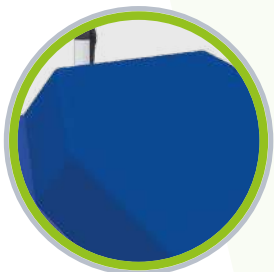

**Colchoneta:** Fabricada espuma de alta densidad con cubierta anti bacteriana e ignífuga para mayor seguridad, higiene y comodidad ayudando en la recuperación de los pacientes.

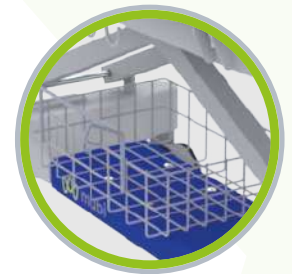

**Canastilla auxiliar inferior.**



**Ruedas y bloqueo central:** Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo central que evita riesgos de caída durante la entrada y salida del paciente.

### Sistema de control:

Comunicación eficiente y segura, ahorro de energía que soportan los actuadores eléctricos libres de mantenimiento, respaldo de batería en caso de fallos del sistema eléctrico.



### Barandas de seguridad:

Cubren la mayor parte de la superficie del paciente reduciendo los riesgos de caída, el sistema de plegado suave permite un fácil acceso al paciente.



### Panel de control:

De fácil y rápido acceso a las funciones especiales, el mando tiene botones para subir y bajar o posicionar la camilla, facilitando el trabajo del personal asistencial.

### Sistemas Electrónicos

\* Los productos MUBI cuentan con sistemas electrónicos CLASE II, es decir, no requieren tierra física para su operación segura, ya que la seguridad del operador y del paciente reside en el doble aislamiento de la fuente de alimentación y no en la puesta a tierra. No requiere conexión a tierra funcional.

\*\*La calidad de la energía de la red eléctrica debe cumplir con la reglamentación vigente según el país y el uso previsto (hospitalario), y para tal fin, el estándar mundialmente adoptado es IEEE519, que define la calidad de la energía que debe existir en el punto de conexión de los dispositivos de red eléctrica.

\*\*\* Los sistemas electrónicos de los productos MUBI cuentan con una fuente de alimentación conforme con la normativa de compatibilidad electromagnética (cableada y radiada) definida por la norma IEC60601-1, donde se resalta la familia de normas IEC61000-4, y se define la inmunidad contra perturbaciones conducidas, transitorios de sobretensión, caídas, interrupciones y bajas de voltaje entre otras.

### Control eléctrico:

Para uso del personal médico; permite ejecutar las funciones de la camilla. Además de una función específica como: Trendelenburg con sólo pulsar un botón.

### Indicadores de estado



On/off



Actividad



Indicador desconexión red eléctrica.



## Características estándar

- Capacidad de carga segura 180 kg.
- Tendido en lamina cold rolled.
- Soportes para correas de sujeción en los tendidos.
- Soportes para bolsa de drenaje.
- Ruedas choques en las 4 esquinas.
- Canastilla inferior auxiliar.
- Barandilla desmontable en pies.
- Barandas laterales de seguridad plegables con seguro retráctil y cubierta superior en aluminio de fácil limpieza.
- Ruedas en poliuretano de 6" libres de mantenimiento.
- Sistema de bloqueo central por pedales.
- Quinta rueda retráctil.
- Porta suero telescópico en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricados en polímero.
- Soportes para porta suero en las esquinas de la camilla

## Dimensiones externas

Largo	80.7" = 205 cm
Ancho	31" = 79 cm
Barandas	15" = 39cm X 59.8" = 152 cm

\*Tolerancias: grados  $\pm 3^\circ$  dimensiones  $\pm 3$ cm.

## Superficie de paciente

Largo	74.8" = 190 cm
Ancho	26" = 67 cm

## Opciones de color aplique colchoneta



## Opciones de color aplique paneles decorativos



## Movimientos

- Flexión espalda  $0^\circ - 77^\circ$
- Trendelenburg  $15^\circ$
- Trendelenburg inverso  $-15^\circ$
- Altura mínima 21" = 54 cm
- Altura máxima 35.8" = 91 cm

Movimientos de espalda, trendelenburg y trendelenburg inverso realizados por control manual  
Actuadores eléctricos (libres de mantenimiento)

## Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.  
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

## Accesorios opcionales

- Mesa de servicio
- Porta suero inoxidable extra
- Soporte tanque de oxígeno (horizontal ó vertical)
- Mesa porta monitor con soporte para historia clínica.
- Soporte porta rollo de tela quiúrgica.

## Nota

\*\*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

\*\*\*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

\*\*\*\* Si en la red eléctrica donde se van a instalar los productos MUBI existen problemas de calidad de energía, se recomienda instalar una UPS ONLINE (doble conversión) dimensionada apropiadamente, considerando 300VA por dispositivo (cama, camilla, silla multipropósito), y evaluar adicionalmente con el equipo de mantenimiento e infraestructura de la institución otros mecanismos de mitigación de problemas de calidad de energía.

\*\*\*\*\*Si la red eléctrica, a la cual está conectado el dispositivo MUBI, excede los límites de los parámetros de calidad eléctricos definidos por la IEE519 y/o las normas aplicables, pueden ocurrir daños permanentes al equipo (cama, camilla, silla multipropósito), los cuales NO serán cubiertos por la garantía.



@ m u b i m e d i c a l - info@mubimedical.com - www.mubimedical.com

Esteban Aronás							FECHA ACTUALIZACIÓN: 1/08/2022
ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	

# TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

[www.mubimedical.com](http://www.mubimedical.com) | [info@mubimedical.com](mailto:info@mubimedical.com)



**Medellín – Colombia**  
Calle 2 # 50-185  
(57) 604 285 2838

**Bogotá – Colombia**  
Calle 127A # 70H-08  
(57) 601 703 7996

**Cali – Colombia**  
Calle 18 # 118-85  
(57) 602 489 6999