

IRIS



CIRUGÍA Y RECUPERACIÓN



COMODIDAD Y DINAMISMO

La camilla para cirugía ocular IRIS garantiza la seguridad del paciente y proporciona a los cirujanos el espacio necesario para las piernas, mejorando la eficiencia y la seguridad en los entornos quirúrgicos.



@mubimedical
www.mubimedical.com

DISEÑO Y SEGURIDAD

Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos utilizados en hospitales como: peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio y alcohol antiséptico.**.



SUPERFICIE DE PACIENTE DE 26 PULGADAS

Camilla con superficie de cinco secciones: una fija y cuatro móviles, fabricadas en acrílico (cabecero y espaldar) y en lámina de acero cold rolled (central móvil, central fijo y pies).

AJUSTE DE ESPALDA Y PIES

Maniguetas retráctiles que permiten posicionar el espaldar y pies de acuerdo a la necesidad del personal asistencial, mejorando la postura y confort del paciente.



AJUSTE DE ALTURA, TRENDELENBURG E INVERSO

Configuración de pedales que activan los movimientos de ascenso - descenso trendelenburg e inverso, cuidadosamente diseñada, ofrece mayor control y acceso, facilitando su uso por parte del personal asistencial reduciendo lesiones por sobreesfuerzos.

SOPORTE TANQUE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DE PACIENTE

** Mezcla recomendada:

- Peróxido de hidrógeno al 3 % y 7,5% 200 ml de peróxido por cada litro de agua.
- Amonio cuaternario 4 ml por cada litro de agua.
- Hipoclorito de sodio 4 cucharadas por cada litro de agua aproximadamente.
- Alcohol antiséptico 60-80% 7 partes de alcohol x 3 partes de agua.



MOVILIDAD Y FÁCIL USO

BARANDAS DE SEGURIDAD

De una sección, plegables con seguro de liberación baranda con una sola mano, mecanismo sencillo y eficaz que evita riesgo de atrapamiento.



ASAS DE EMPUJE PLEGABLES

Ubicadas en la sección pies, mejoran la maniobrabilidad y reducen el esfuerzo del cuidador durante el transporte.



PARACHOQUES

Ubicadas en las esquinas para protección tanto de la camilla como de las paredes en caso de impacto.

PORTA SUERO TELESCÓPICO

Uno fijo plegable (izquierda del espaldar) y uno desmontable para ubicar en cualquiera de las 4 esquinas.



Porta suero desmontable con 2 ganchos de servicio.

Porta suero fijo, plegable en el extremo del cabecero, con 2 ganchos de servicio.




QUINTA RUEDA RETRÁCTIL

Reduce el riesgo de colisión al mejorar el control en trayectorias rectas y curvas.




BLOQUEO CENTRAL

Previene que las ruedas se giren, garantizando seguridad en la salida del paciente.

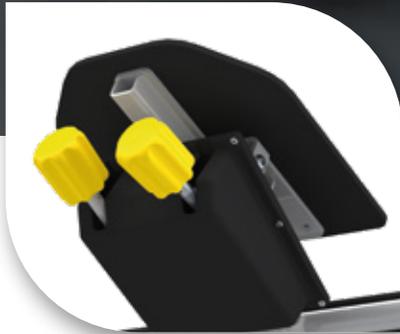

CABEZAL ARTICULADO

Permite ajustes rápidos y suaves mediante mandos giratorios ergonómicos.

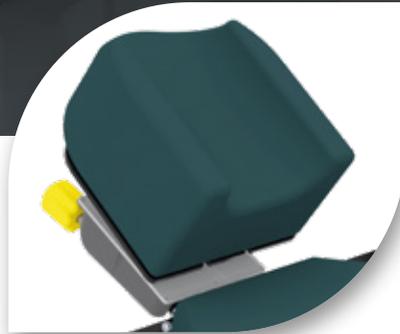

REPOSA CABEZA

Almohadillas removibles, cóncava y plana de 3 in (76.2 mm), con funda antibacteriana y antiestática.



MOVIMIENTOS Y POSICIONES



Espaldar



Pies



Trendelenburg



Trend. Inverso.



Inclinación cabecero



Ajuste altura cabecero



Horizontal



Posición silla



Silla recuperación



Altura mínima 20,5 in
facilitando la entrada/salida segura del paciente.

SUPERFICIE DEL PACIENTE **		
	CON CABECERO	SIN CABECERO
Length	86 in (2184 mm)	74 in (1880 mm)
Width	26 in (635 mm)	



COLOR CUBIERTA
COLCHONETA

TURQUESA
HOSPITAL EXTREME

COLCHONETA (Opcional con costo adicional)

Ayuda en el tratamiento y prevención de las lesiones por presión, núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, 40 ± 2 Kg/m³ (3107.3 lb/ft³)*.

CUBIERTA HOSPITAL EXTREME

Fabricada en nylon, recubrimiento en laca permablok, protección a la luz AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool, impermeable, anti estática ASTM D-257, resistencia a las bacterias AATCC 147, JIS Z 2801, resistente al moho NO GROWTH (NG), costuras invisibles impermeabilizadas, resistente a las puntadas DIN 54301, retardante al fuego FMVSS 302 y libre de látex.

Ref. 740-538 COLCHONETA 26" Y CABECERO PLANO IRIS HOSPITAL EXTR. C/CORR



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Ref. 44EU27
- Cabezal articulado con colchoneta de 4 in, superficie plana y cóncava incluidas.
- 3 pedales para freno y dirección en ambos lados.
- 3 pedales para activar movimientos hidráulicos en ambos lados de la camilla.
- Sistema de elevación hidráulico.
- Manijas retráctiles para flexión espalda y pies.
- Quinta rueda direccional retráctil.
- Ancho total de 30,7 in garantiza el paso a través de las puertas.
- Asas de empuje plegables en el extremo de los pies.
- Bloqueo central activado por pedales.
- Porta suero fijo plegable en piecero.
- 4 soportes para ubicar porta suero.
- Soportes para bolsa de drenaje.
- Soporte para tanque de oxígeno.
- Soporte para pertenencias de paciente.

ESPECIFICACIONES

- 500 lbs. (227 Kg) Capacidad de carga.
- 59.5 lbs. (27 Kg) Capacidad de carga cabezal.
- Ancho superficie de paciente 26 in.
- Largo superficie de paciente 74 in.
- Largo total con cabezal articulado 86 in.
- Flexión pies 0°-32°.
- Flexión espalda 0°-82°.
- Cambio de altura 20.5 in- 33.25 in.
- Trendelenburg 17°/ Trend. inverso -17°.
- Ruedas de 8 in con cubierta en polímero.
- Largo total 91 in.
- Largo total con cabezal 102 in.

Accesorios opcionales (con costo adicional)

- Porta suero desmontable, Ref. 740-461.
- Apoya muñeca superior Ref. 740-516.
- Apoya muñeca temporal 740-531.
- Mesa porta monitor/porta historia Ref. 740-541.
- Reposo hombros Ref. 740-542.

NOTAS

- ACCESORIOS Consulte con su ejecutivo.
- MUBI Medical se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Garantía limitada del producto por tres años.

**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

