

MAXCARE

    
@mubimedical



 **mubi**[®]
MEDICAL

EXAMEN, RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE

CUIDADO Y RENDIMIENTO

MaxCare su aliado estratégico, optimiza los flujos de trabajo clínicos y minimiza el riesgo de complicaciones hospitalarias. Empodera a los cuidadores para que brinden una atención de alta calidad de manera eficiente y segura.

SUPERFICIE DE PACIENTE DE 26 PULGADAS

Camilla con superficie de dos secciones, fabricadas en lámina de acero de alta resistencia y fácil desinfección.

Soporte para ubicar correas de sujeción en sección espalda y pies.

Retenedor de colchoneta en pies.



AJUSTE ESPALDAR

Reduce la migración del paciente, eliminando la cantidad de fuerza requerida para acomodarlo, disminuyendo sobre esfuerzos en el cuidador y reduciendo riesgo de lesiones.


AJUSTE DE ALTURA, TRENDELENBURG E INVERSO

Configuración de pedales que activan los movimientos de ascenso-descenso trendelenburg e inverso. Cuidadosamente diseñada, ofrece mayor control y acceso, facilitando su uso por parte del personal asistencial.



BARANDAS DE SEGURIDAD

Con sistema 'tuck away'. Diseñadas para minimizar los espacios de transferencia y proteger a los pacientes durante el transporte.

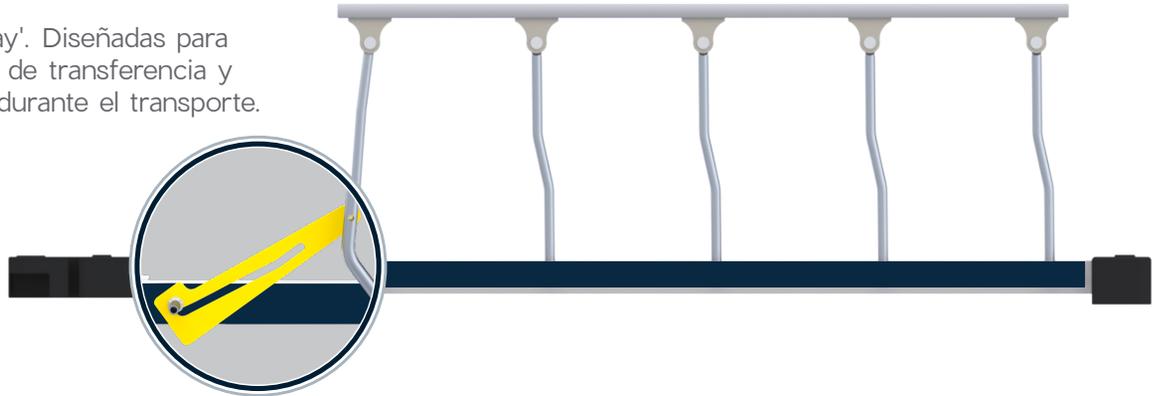

La manija de liberación permite plegar o desplegar la baranda, mejorando la seguridad del paciente al proporcionar soporte adicional y prevenir caídas. Su diseño intuitivo permite a los cuidadores operarla fácilmente, optimizando los flujos de trabajo y garantizando el confort del paciente.



BANDEJA AUXILIAR

Permite ubicar material médico.



ASAS DE EMPUJE PLEGABLES

Ubicadas en la sección espalda, mejoran la maniobrabilidad y reducen el esfuerzo del cuidador durante el transporte.



PARACHOQUES

Ubicados en las esquinas para protección tanto de la camilla como de las paredes en caso de impacto.

PERTENENCIAS DE PACIENTE

Área útil de 295 in² (0.19 m²).



Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, diseñados para durar y mantener altos estándares de higiene, compatible con productos utilizados en hospitales como: peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio y alcohol antiséptico.**.

** Mezcla recomendada:

- Peróxido de hidrógeno al 3 % y 7,5% 200 ml de peróxido por cada litro de agua.
- Amonio cuaternario 4 ml por cada litro de agua.
- Hipoclorito de sodio 4 cucharadas por cada litro de agua aproximadamente.
- Alcohol antiséptico 60-80% 7 partes de alcohol x 3 partes de agua.



MOVILIDAD Y FÁCIL USO



BLOQUEO CENTRAL

Previene que las ruedas se giren, garantizando seguridad en la salida del paciente.



Porta suero fijo, plegable en el extremo del cabecero, con 2 ganchos de servicio.



QUINTA RUEDA RETRÁCTIL

Reduce el riesgo de colisión al mejorar el control en trayectorias rectas y curvas.



SOPORTE HORIZONTAL
TANQUE DE OXÍGENO

Altura mínima 20,6 in
facilitando la entrada/salida segura del paciente.

SUPERFICIE DEL PACIENTE **	
Length	73 in (1854 mm)
Width	26 in (660 mm)


COLCHONETA (Opcional con costo adicional)

Ayuda en el tratamiento y prevención de las lesiones por presión, núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$. (1.623 lb/ft³)*.

CUBIERTA HOSPITAL EXTREME

Fabricada en nylon, recubrimiento en laca permablok, protección a la luz AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool, impermeable, anti estática ASTM D-257, resistencia a las bacterias AATCC 147, JIS Z 2801, resistente al moho NO GROWTH (NG), costuras invisibles impermeabilizadas, resistente a las puntadas DIN 54301, retardante al fuego FMVSS 302 y libre de látex.

Ref. 740-570: 3 in MATTRESS FOR MAXCARE STRETCHER - HOSPITAL XTREME
 Ref. 740-571: 4 in MATTRESS FOR MAXCARE STRETCHER - HOSPITAL XTREME
 Ref. 740-572: 5 in MATTRESS FOR MAXCARE STRETCHER - HOSPITAL XTREME

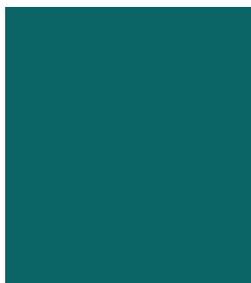

COLOR CUBIERTA
COLCHONETA

TURQUESA
HOSPITAL EXTREME

DISEÑO ESTÁNDAR CON MÚLTIPLES CONFIGURACIONES,
PENSANDO EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD.

MESA PORTAMONITOR CON PORTA HISTORIA * Ref. 740-573

*Accesorio Opcional (Con Costo Adicional)



MOVIMIENTOS Y POSICIONES *



Espaldar



Horizontal




Trendelenburg



Trend. Inverso.

DIMENSIONES GENERALES *

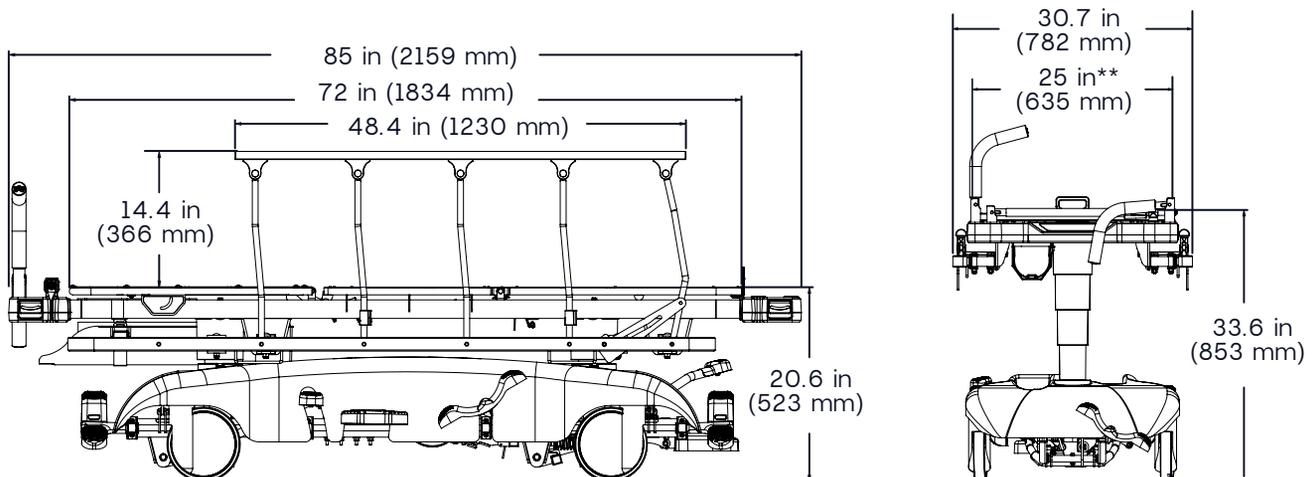

*Movimientos realizados por mecanismos neumáticos e hidráulicos asistidos por pedales en ambos lados de la camilla.

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 0.5 in (12.7 mm).

** Ancho de plataforma 25 in - Ancho de paciente (con colchoneta) 26 in

FABRICACIÓN Y ACABADO

- Estructura fabricada en tubería estructural de acero cold rolled alta resistencia.
- Acabado pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática resistente a la oxidación con 3.000 horas de cámara salina.

EMBALAJE

- Contenedor: 40 HC - 39 unds, 40 STD - 26 unds, 20 STD - 12 unds.



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Pedales de freno y dirección ubicados en los 4 lados de la camilla.
- Sección de rodillas fija.
- Superficie útil para paciente 26 in.
- Quinta rueda retráctil.
- Asas de empuje plegables en espaldar.
- 1 porta suero fijo plegable & 1 porta suero telescópico desmontable ambos con 2 ganchos de servicio.
- Indicador de grados para espalda, trendelenburg e inverso.
- Ruedas de 8 in, con protector en polímero.
- Espaldar neumático regulable.
- Trendelenburg y trendelenburg inverso.
- Barandas laterales de seguridad 'tuck away', plegables con seguro de liberación.
- 4 Soportes para ubicar porta suero.
- Soportes para ubicar bolsa de drenaje.
- 3 pedales para ajustar altura, trendelenburg e inverso.
- Sistema de freno centralizado y 5ta rueda direccional.
- Ancho total de 30.7 in, facilita el ingreso-salida de los ambientes hospitalarios.
- Retenedor colchoneta en sección pies.
- Soporte horizontal para ubicar y transportar tanque de oxígeno bajo el espaldar.
- Soportes correas de sujeción en sección espalda y pies.
- Soporte para ubicar pertenencias del paciente en la base.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga trabajo seguro 700 lbs.
- Superficie de paciente ancho 26 in.
- Superficie de paciente largo 73 in
- Flexión espalda 0° - 90°.
- Cambio de altura 20.6 in - 33.6 in.
- Trendelenburg y trendelenburg inverso $\pm 17^\circ$.
- Ancho total camilla 30.7 in.
- Largo total camilla 85 in.
- 3 Pedales de control hidráulico para ajustar movimientos de altura, trendelenburg e inverso, en los lados de la camilla y extremo pies.

Accesorios opcionales (con costo adicional)

- Soporte tanque de oxígeno vertical. Ref. 730-675.
- Mesa porta monitor con soporte para historia. Ref. 740-573.
- Porta suero telescópico desmontable. Ref. 740-461.
- Portasuero de instalacion permanente. Ref. 740-567-1.
- Asas de empuje plegables en los pies. Ref. 740-566-1.
- 3 in Colchoneta con cubierta antibacterial y antiestática. Ref. 740-570.
- 4 in Colchoneta con cubierta antibacterial y antiestática. Ref. 740-571.
- 5 in Colchoneta con cubierta antibacterial y antiestática. Ref. 740-572.

NOTAS

- ACCESORIOS, consulte con su ejecutivo.
- MUBI Medical se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Garantía limitada, consulte con su ejecutivo.

**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

