

# GALAXIA

HOSPITALIZACIÓN




Ref.3156



**Una cama segura, cómoda y funcional, diseñada** para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en unidades de hospitalización.



@mubimedical  
www.mubimedical.com

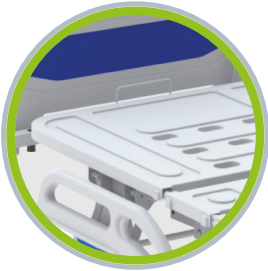

**Superficie de paciente:**  
compuesta por 4  
secciones: 1 fija y 3  
móviles, desmontables  
fabricados en ABS de alto  
impacto facilitando la  
limpieza y desinfección.



**Colchón clínico:**

Ayuda en el tratamiento y  
prevención de las lesiones  
por presión, fabricado en  
espuma de poliuretano de  
alta densidad. Con  
cubierta en tela libre de  
látex y ignífuga y  
**antibacterial. Accesorio  
opcional\***



**Porta suero graduable:**  
con ganchos de doble  
servicio en polímero de  
alto impacto. Capacidad  
de 17.6lb (8kg).



**Cabecero y piecero:**

Fabricados en polímero  
ABS de alta resistencia,  
desmontables con pin  
de seguridad, de fácil  
limpieza y desinfección.



**Barandas de seguridad:**  
Fabricadas en polímero de alto impacto (ABS) asistidas por amortiguador, facilita el acceso del paciente.



**Manija accionamiento:**  
Permite al personal asistencial llevar la cama en diferentes posiciones.

**Ruedas y bloqueo:**

Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad en la entrada y salida del paciente.



## Características estándar

- Capacidad de carga segura 396.8lb (180kg).
- Tendido en polímero ABS.
- Cabecero y piecero desmontables en polímero ABS.
- Retenedores de colchón en espalda y pies.
- Soportes para correas de sujeción en tórax y pies.
- Soportes para bolsa de drenaje.
- Barandas laterales de seguridad de doble sección.
- Ruedas en poliuretano de (6in) libres de mantenimiento.
- Sistema de bloqueo en cada rueda.
- Porta suero telescópico en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricados en polímero.
- Soportes para porta suero en las esquinas de la cama.

## Dimensiones externas

Largo	83in (2110mm)
Ancho	41in (1050mm)
Barandas	11in X 28in (280mm X 720mm)

\*Tolerancias: grados  $\pm 3^\circ$  dimensiones  $\pm 1in$  (17mcm).

## Superficie de paciente

Largo	74.8in (1900mm)
Ancho	35in (900mm)

## Accesorios opcionales

- Soporte porta historias
- Soporte para sábanas
- Mesa porta monitor
- Porta suero inoxidable extra
- Soporte tanque de oxígeno vertical

## Movimientos

- Flexión espalda  $0^\circ$  a  $74^\circ$
- Flexión rodillas  $0^\circ$  a  $40^\circ$
- Altura mínima 18in (460mm)
- Altura máxima 24in (620mm)

Movimientos de espalda, pies y altura realizados por tornillo sin fin asistidos por medio de manigueta retráctil.

## Fabricación y acabado

- Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
- Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

## Opciones de color aplique cabecero/piecero



## Nota

\*\*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

\*\*\*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



@mubimedical  
info@mubimedical.com  
www.mubimedical.com

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE/ COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 17/01/2023
-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------------

# TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

[www.mubimedical.com](http://www.mubimedical.com) | [info@mubimedical.com](mailto:info@mubimedical.com)



**Medellín - Colombia**  
Calle 2 # 50-185  
(57) 604 285 2838

**Bogotá - Colombia**  
Calle 127A # 70H-08  
(57) 601 703 7996

**Cali - Colombia**  
Calle 18 # 118-85  
(57) 602 489 6999