

HYDRUX

EXAMEN Y RECUPERACIÓN



CAMILLA HIDRÁULICA 2 SECCIONES
BARANDA PLEGABLE FC TL
Ref. 4421



@mubimedical
www.mubimedical.com



COMODIDAD Y DINAMISMO

Una solución de camilla de transporte con excelente maniobrabilidad diseñada para traslados, eficacia y resistencia al rigor del entorno sanitario.

DISEÑO Y SEGURIDAD

SUPERFICIE DE PACIENTE

De dos secciones: una fija y una móvil, fabricadas en lámina de acero cold rolled, facilitando su desinfección.



RUEDA PARACHOQUES

Para la protección tanto de la camilla como de las paredes de la institución en caso de impacto.



ASAS DE EMPUJE

Ergonómicas NO plegables, útiles para la fácil operación del transporte.

BARANDAS DE SEGURIDAD

De una sección, plegables, fabricadas en polímero de alta resistencia y cubierta de aluminio. Su operación es simple y con una sola mano, facilitando la operación del personal asistencial.



Seguro de liberación baranda.

MOVILIDAD Y FÁCIL USO

AJUSTE ESPALDAR

Soporte fácil, ágil y seguro para ajustar la camilla en las posiciones requeridas, facilitando la labor del personal asistencial y mejorando la experiencia del paciente.



AJUSTE DE ALTURA, TRENDELENBURG E INVERSO

Movimientos asistidos por pedales en ambos lados de la camilla.

SOPORTE TANQUE OXÍGENO

Ubicado en la cubierta inferior.



QUINTA RUEDA RETRÁCTIL

Reduce el riesgo de colisión al mejorar el control en trayectorias rectas y curvas.



RUEDAS Y FRENO

Fabricadas en poliuretano, libres de mantenimiento, pedales en las esquinas para activar freno, minimiza el riesgo de lesiones por caídas durante el ingreso y egreso del paciente.

SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio.

De fácil configuración, posiciones* que aportan en el traslado, descanso, tratamiento y recuperación del paciente.



Flexión espaldar



Horizontal



Trendelenburg



Trend. Inverso



Cambio altura

*Ver cuadro de dimensiones (especificaciones).



PORTA SUERO

Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio.
Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).



Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos usados en hospitales como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol antiséptico.


COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad. Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex.




OPCIONES DE COLOR *


Personalice el tapizado de la colchoneta de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.

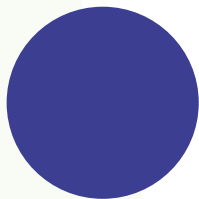


AZUL
REY

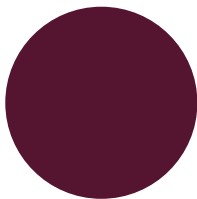


BRAVIA
MORA

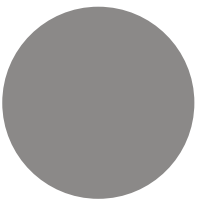


GRIS

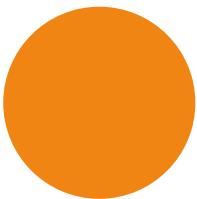


NARANJA

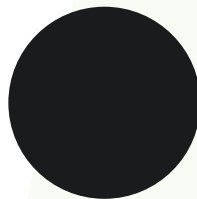

NEGRO

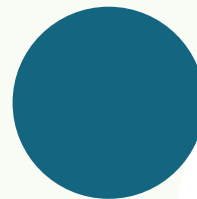

TURQUESA

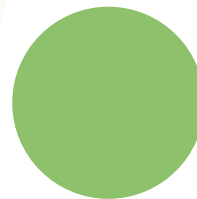


VERDE
MANZANA

* Con costo adicional. Solicite la guía de acabados completa.

* Los cambios de color pueden afectar al plazo de entrega; consulte con su ejecutivo de cuentas.

* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 10 unidades.

DIMENSIONES *

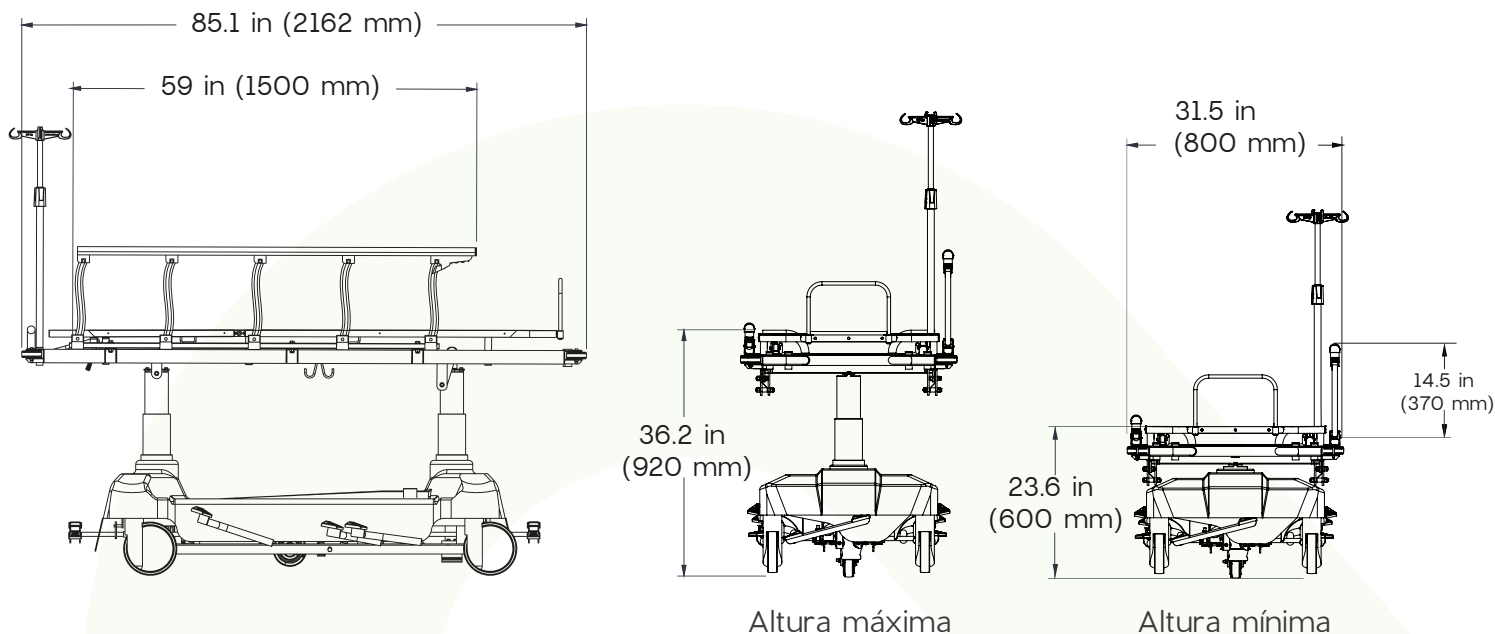

SUPERFICIE DE PACIENTE* (útiles)

Largo	74.8 in (1900 mm)
Ancho	26.4 in (670 mm)
Barandas (ancho x alto)	59 in X 14.5 in (1500 mm X 370 mm)

MOVIMIENTOS *

Flexión espalda	0° a 74°
Trendelenburg	19°
Trendelenburg inverso	-16°

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

EMBALAJE

- Caja Ref: 5955. Estiba Ref: 10592.
- Contenedor: 20 FT STD: 12 UND. 40 FT STD: 24 UND. 40 FT HC: 36 UND.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR *

- Capacidad de carga segura 485 lbs (220 Kg).
- Flexión espaldar asistido por amortiguador neumático.
- Cambio de altura, trendelenburg e inverso asistidos por sistema hidráulico.
- Tendido de 2 secciones en lámina de acero cold rolled.
- Barandilla de seguridad desmontable en sección pies.
- Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in (80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex.
- Barandas laterales de seguridad, plegables; reposan a nivel del tendido, seguro de liberación retráctil, accionamiento con una mano, fabricadas en polímero de alto impacto y superficie en aluminio de fácil desinfección.
- Ruedas parachoques en las esquinas.
- Asas de empuje en los extremos de la camilla.
- Soporte para bolsa de drenaje en ambos lados de la camilla.
- Soportes para correas de sujeción en tórax y piernas.
- Porta suero graduable en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro de liberación fabricados en polímero. Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).
- Soportes porta suero en las esquinas de la camilla.
- Cubierta inferior termoformada con soporte para ubicar tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente.
- Ruedas en poliuretano de 8 in (203.2 mm) libres de mantenimiento.
- Quinta rueda direccional retráctil y freno centralizado asistidos por pedales en los extremos de la camilla.

FABRICACIÓN Y ACABADO *

- Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

ACCESORIOS OPCIONALES* Con costo adicional

- Porta suero inoxidable extra. Ref. 730-438.
- Soporte tanque de oxígeno vertical. Ref. 740-195
- Mesa porta monitor con soporte para historia clínica. Ref. 740-138.

NOTA

*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

**El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



TRANSFORMAMOS ESPACIOS,
MEJORAMOS VIDAS



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999



mubi

M E D I C A L

Fecha de actualización: 22/01/2025