

SOMA

RECLINER





SOMA ha sido diseñada para brindar confort y bienestar durante sesiones prolongadas de atención, combinando ergonomía, funcionalidad y versatilidad para contribuir a espacios de atención más confortables y humanizados.



ESPALDAR

Espuma de poliuretano inyectado en frío, diseñada para brindar un soporte lumbar ergonómico.

Reclinación mediante amortiguador neumático de 700 N de fuerza, accionado con manija metálica ubicada externamente en el panel.

ASIENTO

Espuma de poliuretano inyectado en frío con sistema de minipockets y bandas elásticas para mayor confort en permanencias prolongadas. Mecanismo accionado por palanca lateral externa: se hala hacia atrás para abrir y se empuja hacia adelante, apoyando las pantorrillas, para cerrar.

Incluye flipper interno de soporte para pantorrillas y cojín removible para mantenimiento.



COLORES TAPICERÍA

Personalice el recubrimiento de la tapicería para integrarlo al ambiente de sus espacios.

COLORES ESTÁNDAR

PRANNA®


Vinilo impermeable, de fácil desinfección, resistente a la abrasión y a los microorganismos.



GRIS MEDIO

SILVERTEX®

Especialmente diseñado para uso en interiores y exteriores, con una textura resistente al desgaste y similar a la tela, impermeable con tecnología Permablock® para proteger contra los gérmenes, la abrasión y las manchas.

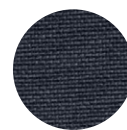

STORM

COLORES PERSONALIZADOS*

PRANNA®




SILVERTEX®



* Los cambios de color pueden generar costos adicionales y afectar el plazo de entrega; Consulte con su ejecutivo de cuenta. Solicite la paleta de colores para más opciones.

* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 50 unidades.

DIMENSIONES*

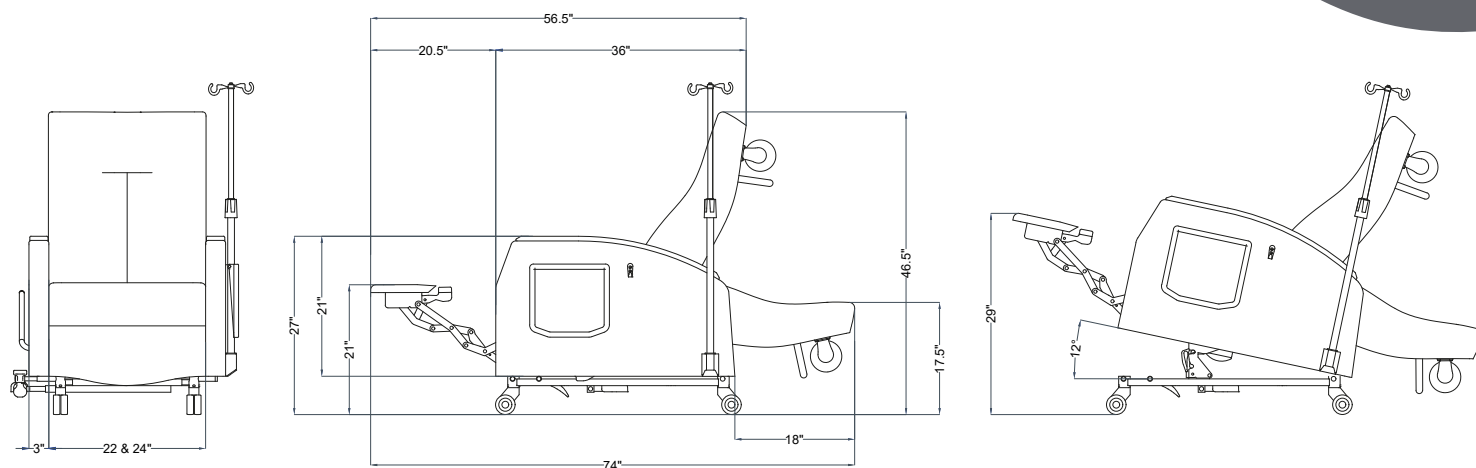

POSICIONES



UPRIGHT



TRENDELENBURG



SLEEP

CONFIGURACIONES

Seleccione la configuración base según sus necesidades operativas. Estas opciones determinan la configuración final del producto y se instalan en fábrica.

	BASIC	SLEEP	TREND	TABLE	SILVER	PRO	MAX
							
Espaldar 28°	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Espaldar 90°	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Trendelenburg 102°	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
USB-C	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Ancho Asiento 24 in	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Freno Centralizado	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
Mesa Plegable	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Brazo Abatible	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Reposabrazos Multicolor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Tapizado Silvertex	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Freno Individual	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

ACABADOS

Elija el color de su preferencia para las superficies termolaminadas; mesa plegable y reposabrazos multicolor.



BLACK
CLASSIC



HALIFAX OAK
TABAK
SYNCHRO




OAK MELINGA
GREY



PACIFIC B



WENGUE
REALISTIC
PORE

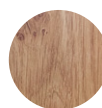

WINCHESTER
PA

ACCESORIOS OPCIONALES *

Asa de empuje



Soporte portasuero



Reposacabezas



Dispensador para
rollo de papel*



Gancho para
bolsa de fluidos



Forro protector
de espaldar
removible
con/sin
bordado.

*Aplica para versión de ancho 24 in

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR *

- Capacidad de carga 227 Kg (500 lb).
- Ancho interno del asiento 22 o 24 in.
- Grosor del panel lateral 3 in.
- Amortiguador neumático del espaldar: 700 N de fuerza.
- Ruedas de 3 in, soporte máximo 70 Kg por rueda.
- Soporte para pantorrillas reclinable mediante palanca lateral.

FABRICACIÓN Y ACABADO **

- Espaldar: tubo de acero 1 in, cal. 16 + refuerzos CR/HR.
- Asiento: tubo de acero ¾ in cal. 18 + refuerzos CR/HR.
- Panel: tubo de acero ½ in x 1 in cal. 16 + refuerzos CR/HR.
- Espumas de poliuretano inyectado en frío; asiento con minipockets y bandas elásticas.
- Costuras con sistema de sellado, impermeables al ingreso de fluidos.

NOTA

*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

**El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

**TRANSFORMAMOS ESPACIOS,
MEJORAMOS VIDAS**



@mubimedical
www.mubimedical.com

Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999



Fecha actualización: 23/07/2026