



MINDcare

CAMA PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN

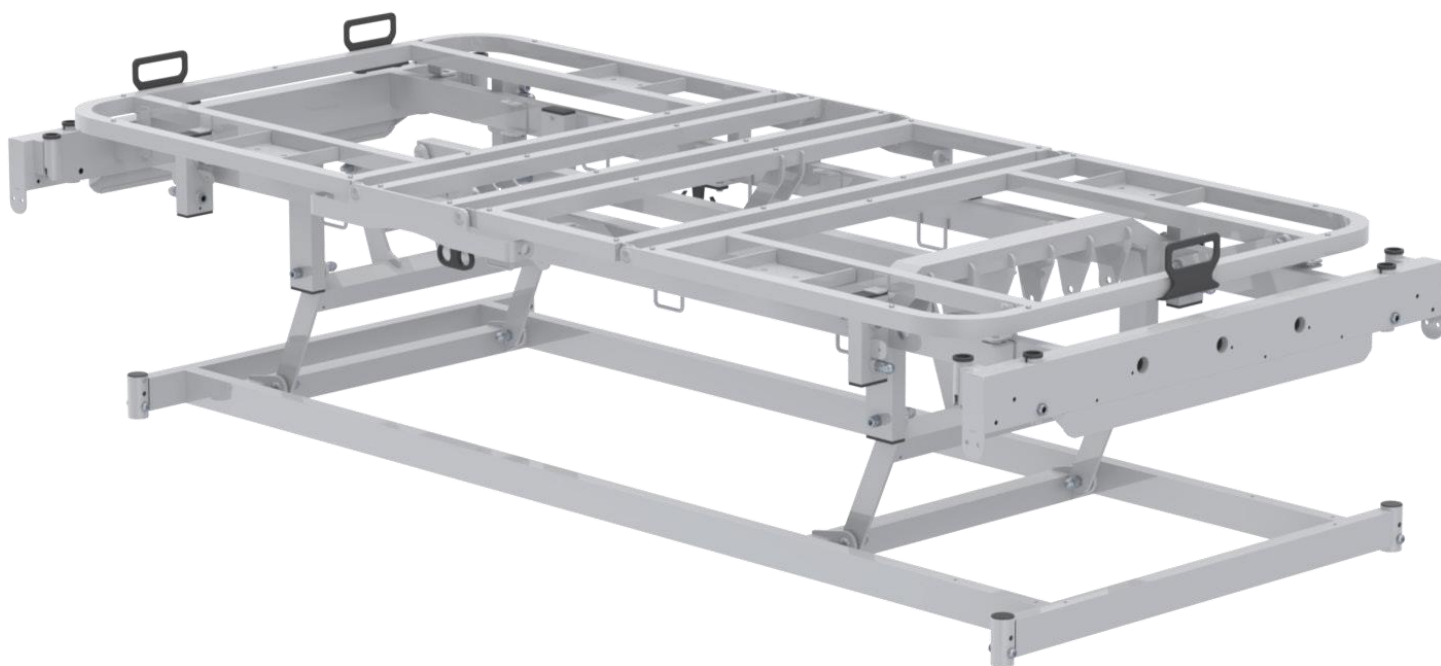
Ref: 3260 PANAMA
3262 PANAMA
3263 PANAMA
3264 PANAMA



GALAXIA

*Imagen de referencia. Componentes pueden variar según configuración seleccionada.

La línea de camas psiquiátricas MindCare está diseñada para elevar los estándares de seguridad y eficiencia en entornos de alta exigencia. Su configuración base —balancines, marco reforzado, herrajes de alto desempeño y barandas seguras— ofrece una plataforma sólida y confiable.



COMODIDAD Y DINAMISMO

Conozca su poderosa capacidad de transformarse. Esta cama se adapta a su institución. Puede configurarla a su gusto, seleccionando los elementos que mejor respondan a los protocolos, espacio y estilo de atención. El resultado: una solución única, hecha a la medida, que maximiza la protección del paciente y potencia el desempeño del personal asistencial.

DISEÑO Y SEGURIDAD



SUPERFICIE DE PACIENTE

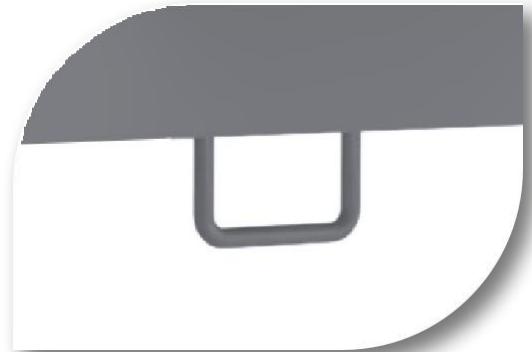
Fabricadas en lámina de acero inoxidable o de acero cold rolled con cubierta de pintura epóxica.

Retenedores de colchón en espaldar y pies, fabricados en polímero de alta resistencia.



SOPORTES BOLSA DE DRENAJE

2; ubicados en cada lateral de la cama.



SOPORTES PARA CORREAS DE SUJECCIÓN

8; 4 en cada lateral de la cama.

COLCHÓN CLÍNICO *



Ayuda en el tratamiento y prevención de las lesiones por presión, núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad.

Colchón de espuma de goma tipo hospitalario con cierre y cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, impermeable, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG) que tolera detergentes de uso

hospitalario, costuras invisibles impermeabilizadas, retardante al fuego (antidesgarradura) y libre de latex ajustado a la superficie útil de la cama de 13 cm o 15 cm de grosor.

Nuestra línea MindCare pone a su disposición cuatro configuraciones base, diseñadas para integrarse a la perfección con cada uno de los accesorios disponibles. Cada opción incluye balancines, marco, herrajes y barandas como estructura esencial.

• Paso 1.

Seleccione la baranda que mejor se ajuste a las necesidades de su institución, tomando como referencia el nivel de atención según la clasificación clínica de riesgo y contención.

A. 3260 Serenity.

Menor riesgo - Baranda plegable.



serenity

B. 3262 Secure.

Riesgo moderado - Baranda doble sección.



secure

C. 3263 Balance.

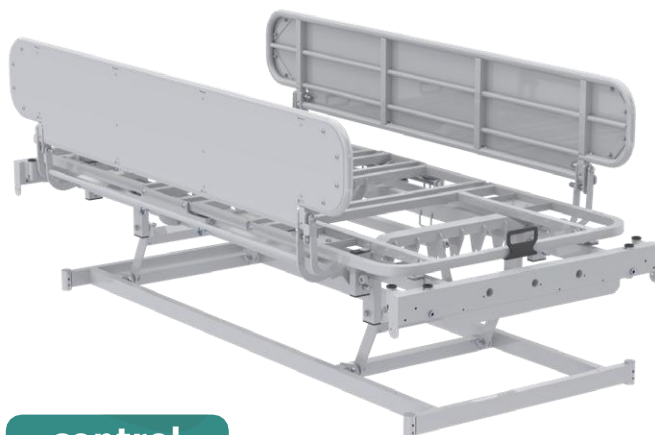
Riesgo alto. - Baranda tubular.



balance

D. 3264 Control.

Máxima seguridad - Baranda tipo búnquer.



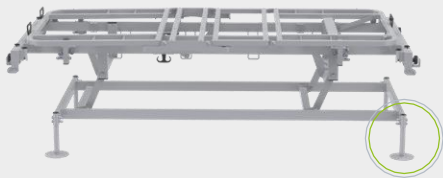
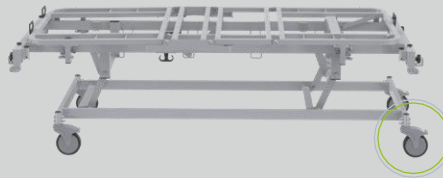
control

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN (instalación en fábrica)

• Paso 2.

Selecciones las configuraciones y accesorios base según las necesidades operativas. Estas opciones determinan la configuración final del producto y serán instaladas en fábrica.

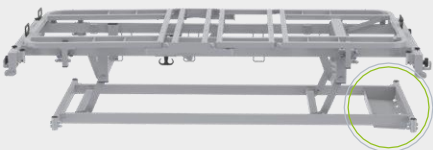
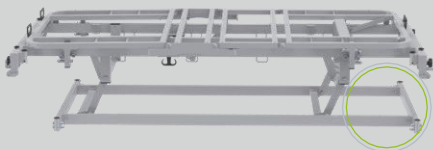
A. TIPO DE BASE

PATAS EMPOTRADAS	RUEDAS
Ref. 730-716. 	Ref. 730-740. 

Anclaje a piso por medio de tornillos. Diseñado para asegurar la estabilidad, evitando desplazamientos involuntarios y garantizando la seguridad de paciente.

En poliuretano, de 5", libres de mantenimiento y con pestaña retráctil individual para activar freno.

B. BANDEJA DE PERTENENCIAS

SI	NO
Ref. 730-735. 	N/A. 

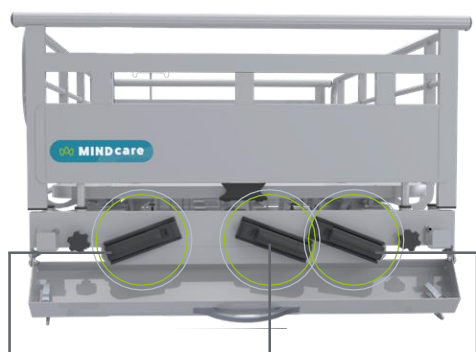
Permite ubicar pertenencias del paciente.

C. TENDIDOS

ACERO COLD ROLLED		ACERO INOXIDABLE	
Con perforaciones 	Ref. 730-729.	Con perforaciones 	Ref. 730-758.
Sin perforaciones. 	Ref. 730-757.	Sin perforaciones. 	Ref. 730-759.

D. MOVIMIENTOS

Movimientos para las diferentes posiciones por manijas no removibles, retráctiles fabricadas en polímero colocadas del lado de los pies que se ocultan o plegan en los pieceros.

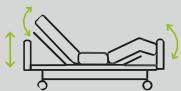
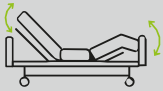
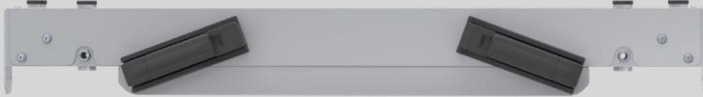
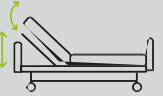
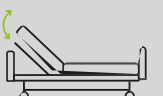
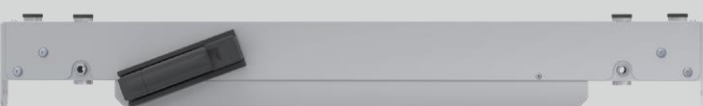
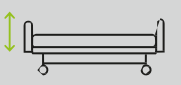
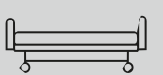
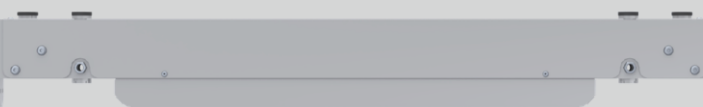


Manija flexión espaldar.

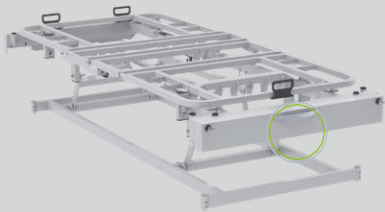
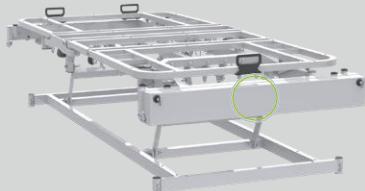
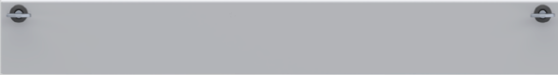
Manija cambio altura.

Manija flexión pies.

- **Altura fija:** La cama se entrega con una altura de 370 mm y requiere ajuste en sitio por parte del cliente si desea alcanzar la altura de 500 mm.
- **Altura variable:** 370 - 620 mm (± 25.4 mm).
- **Flexión espaldar:** 75° ($\pm 3^\circ$).
- **Flexión pies:** 45° ($\pm 3^\circ$).

MOVIMIENTOS*		CÓDIGO
 Espaldar, pies y altura		Ref. 730-762.
 Espaldar y pies		Ref. 730-765.
 Espaldar y altura		Ref. 730-764.
 Espaldar		Ref. 730-766.
 Altura		Ref. 730-738.
 Sin movimientos		Ref. 730-719.

E. CARCASA PARA TORNILLOS EN CABECERO Y PIECERO

	SI	NO
Con manija 	Ref. 730-736. 	N/A.
Sin manija 	Ref. 730-760. 	

F. PORTA SUERO

	SI	NO
	Ref. 730-737.	N/A.

G. CORREA TORAX (1 UND)

SI	NO
Ref. 730-284.	N/A.

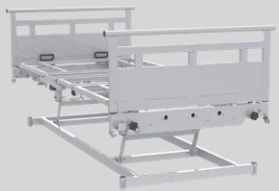
Especificar la cantidad de correas requeridas por cama.

H. CORREA PARA EXTREMIDADES (PAR)

SI	NO
Ref. 730-578.	N/A.

Especificar la cantidad de correas requeridas por cama.

I. CABECERO Y PIECERO

ACERO COLD ROLLED		POLÍMERO
Cuadrado 	Ref. 730-721.	Ref. 730-722. 
Redondo cerrado. 	Ref. 730-739.	

J. COLCHÓN

Colchón anti escaras (1890*900*130 mm)	Ref. 900-80.
Colchón anti escaras (1890*900*150 mm)	Ref. 900-82.
Colchón viscoelástico (1900*900*150 mm)	Ref. 900-99.
Colchón clínico- proquitex (1900*890*130 mm)	Ref. 900-8001.

• Paso 3.

Agregue accesorios para variar la configuración inicial, estos pueden ser instalados en sitio sin herramientas especializadas. (Se entregan en un empaque independiente).

ACCESORIOS OPCIONALES	
Patas empotradas.	Ref. 730-716-01.
Ruedas 5 in.	Ref. 730-740-01.
Carcasa tornillos con manija.	Ref. 730-736-01.
Carcasa tornillos sin manija.	Ref. 730-760-01.
Cab/pie. metálico red. cerrado.	Ref. 730-739-01.
Cab/pie. metálico cuadrado.	Ref. 730-721-01.
Cab/pie plástico Mubi.	Ref. 730-722-01.
Porta suero alt fija con candado.	Ref. 730-737-01.
Correa torax (1 und).	Ref. 730-284-01.
Correa extremidades (par).	Ref. 730-578-01.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Capacidad de carga segura: 485 lb (220 kg).
- Ocho (8) Soportes para correas de sujeción, integrados alrededor de la cama:
 - Dos (2) en la parte superior del espaldar.
 - Dos (2) en el bastidor central fijo.
 - Dos (2) en el bastidor central móvil.
 - Dos (2) en la parte inferior del piecero.
- Soportes para porta suero ubicados en las cuatro esquinas de la cama.
- Dos (2) Soportes para bolsa de drenaje, uno a cada lado de la cama.
- Acabado con pintura en polvo epoxi libre de plomo, resistente a desinfectantes y detergentes hospitalarios de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

EMBALAJE

- Caja con estiba Ref. 15406.
- Contenedor: 20STD: 15 UND. 40STD: 30 UND. 40HC: 30 UND.

SUPERFICIE DE PACIENTE*

Largo	74.8 in (1900 mm)
Ancho	35.4 in (900 mm)

DIMENSIONES GENERALES*

Largo máximo**	83.8 in (2130 mm)
Ancho	39.7 in (1010 mm)

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm).
Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

**Largo varía según los accesorios que elija.

NOTA

* MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

** El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.