

GALAXIA

CAMAS HOSPITALARIAS



CAMA MECÁNICA HOSPITALIZACIÓN
BARANDA PLEGABLE TP BI
Ref.314503 PANAMA



@mubimedical
www.mubimedical.com



COMODIDAD Y DINAMISMO

Galaxia una familia de camas mecánicas que ofrece un máximo confort para pacientes y cuidadores en hospitalización y recuperación.

Sus movimientos y funciones activados de forma manual permiten configurar múltiples posiciones y funcionalidades que aportan en la oportuna recuperación del paciente apoyando de manera práctica, segura y sencilla al personal asistencial. Fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio.

DISEÑO Y SEGURIDAD



SUPERFICIE DE PACIENTE

De cuatro secciones: una fija y tres móviles, fabricadas en polímero de alta resistencia o en lámina de acero cold rolled con cubierta de pintura epóxica.


CABECERO Y PIECERO

Desmontables, con geometría que cumple la función de asa horizontal para transporte y movimientos seguros, con sistema de liberación y seguro tipo pin para mayor seguridad.



BARANDAS DE SEGURIDAD

De una sección, plegables, fabricadas en polímero de alta resistencia y cubierta de aluminio. Su operación es simple y con una sola mano, facilitando la operación del personal asistencial.

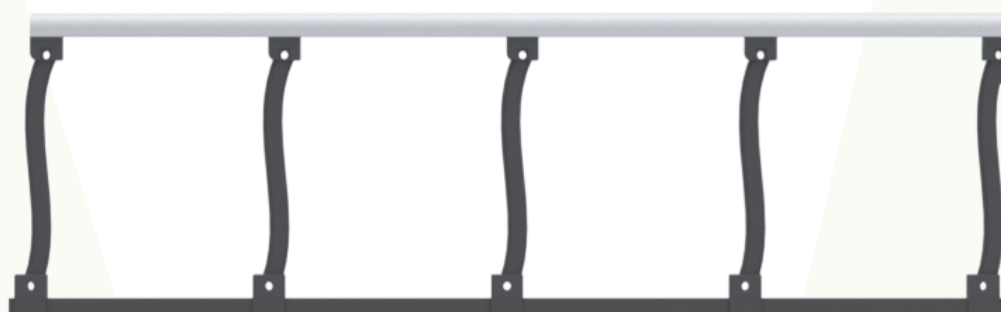

Seguro de liberación
baranda.

MOVILIDAD Y FÁCIL USO



PORTA SUERO

Graduable y desmontable.
Con dos ganchos de doble
servicio. Capacidad de
carga 17.6 lb (8 Kg).

AJUSTE ESPALDAR, PIES Y CAMBIO DE ALTURA

Soporte fácil, ágil y seguro para ajustar las posiciones
requeridas, facilitando la labor del personal asistencial
y mejorando la experiencia del paciente.

Los movimientos son asistidos por manijas retráctiles
fabricadas en polímero de alta resistencia que
permitiendo llevar la cama a diferentes posiciones.



RUEDAS Y FRENO

Fabricadas en poliuretano, libres de
mantenimiento, pestaña retráctil en
cada rueda para activar freno, minimiza
el riesgo de lesiones por caídas durante
el ingreso y egreso del paciente.

COLCHÓN CLÍNICO *

Ayuda en el tratamiento y prevención de las lesiones por presión, núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad.



Colchón de espuma de goma tipo hospitalario con cierre y cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, impermeable, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG) que tolera detergentes de uso hospitalario, costuras invisibles impermeabilizadas, retardante al fuego (antidesgarradura) y libre de latex ajustado a la superficie útil de la cama de 13 cm o 15 cm de grosor.

SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio.

De fácil configuración, posiciones que aportan en el traslado, descanso, tratamiento y recuperación del paciente.



Flexión espalda



Flexión rodillas



Horizontal



Trendelenburg



Trend. Inverso



Cambio altura

*Ver cuadro de especificaciones.



OPCIONES DE COLOR*

Personalice el tapizado de la colchoneta de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.



AZUL
REY



BRAVIA
MORA



GRIS



NARANJA



NEGRO



TURQUESA




VERDE
MANZANA

* Con costo adicional. Solicite la guía de acabados completa.

* Los cambios de color pueden afectar al plazo de entrega; consulte con su ejecutivo de cuentas.

* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 10 unidades.

DIMENSIONES*

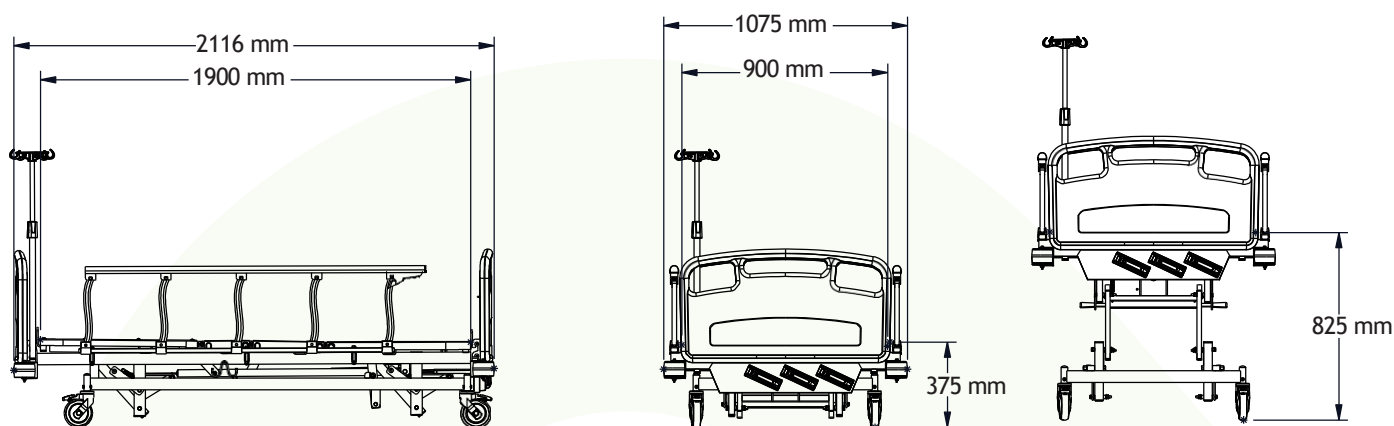

DIMENSIONES EXTERNAS

Largo	83.3 in (2116 mm)
Ancho	42.3 in (1075 mm)
Barandas (ancho X alto)	15.2 in X 60.2 in (385 mm X 1530 mm)

SUPERFICIE DE PACIENTE (útiles)

Largo	74.8 in (1900 mm)
Ancho	35.4 in (900 mm)

MOVIMIENTOS

Flexión espalda	0° a 70°
Flexión rodillas	0° a 45°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg inverso	-12°
Altura mínima	14.8 in (375 mm)
Altura máxima	32.5 in (825 mm)

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*

- Ajuste manual de funciones: flexión espaldar, flexión rodillas, cambio de altura, trendelenburg e inverso.
- Movimientos asistidos por manivelas retráctiles fabricadas en polímero.
- Superficie de paciente de 4 secciones una fija y tres móviles, fabricadas en polímero de alta resistencia o en lámina de acero cold rolled con cubierta de pintura epóxica.
- Barandas laterales de seguridad plegables accionamiento con una sola mano, de una sección fabricadas en polímero de alta resistencia y cubierta superior en aluminio.
- Cabecero y piecero desmontables, en polímero de alta resistencia y seguro de liberación.
- Retenedores de colchón en espalda y pies.
- Soportes para correas de sujeción en tórax y piernas.
- Soportes para bolsa de drenaje en ambos lados de la cama.
- Ruedas parachoques en las esquinas.
- Porta suero telescópico en acero inoxidable con gancho de doble servicio. Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).
- Soportes para ubicar porta suero en las 4 esquinas de la cama.
- Ruedas en poliuretano de 5 in (127 mm) libres de mantenimiento.
- Capacidad de carga segura 485 lb (220 Kg).
- Pestaña retráctil en cada rueda para activar freno.

FABRICACIÓN Y ACABADO **

- Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

ACCESORIOS OPCIONALES* Con costo adicional

- Porta suero desmontable y graduable.

NOTA

* MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

** El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



@mubimedical - info@mubimedical.com - www.mubimedical.com

FECHA ACTUALIZACIÓN:						
ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Ingeniería	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA

**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

