

HYDRUX ZR

CAMILLA EXAMEN Y RECUPERACIÓN ZR 4 PLANOS BP
Ref.4424 PANAMA





COMODIDAD Y DINAMISMO

Una solución de camilla de transporte con excelente maniobrabilidad diseñada para traslados, eficacia y resistencia al rigor del entorno sanitario.

DISEÑO Y SEGURIDAD

SUPERFICIE DE PACIENTE

De cuatro secciones: una fija y tres móviles, fabricadas en acrílico radiolúcido, apta para toma de rayos-X en toda su extensión.



RUEDA PARACHOQUES

Para la protección tanto de la camilla como de las paredes de la institución en caso de impacto.




ASAS DE EMPUJE

Ergonómicas NO plegables, útiles para la fácil operación del transporte.

BARANDAS DE SEGURIDAD

De una sección, plegables, fabricadas en polímero de alta resistencia y cubierta de aluminio. Su operación es simple y con una sola mano, facilitando la operación del personal asistencial.

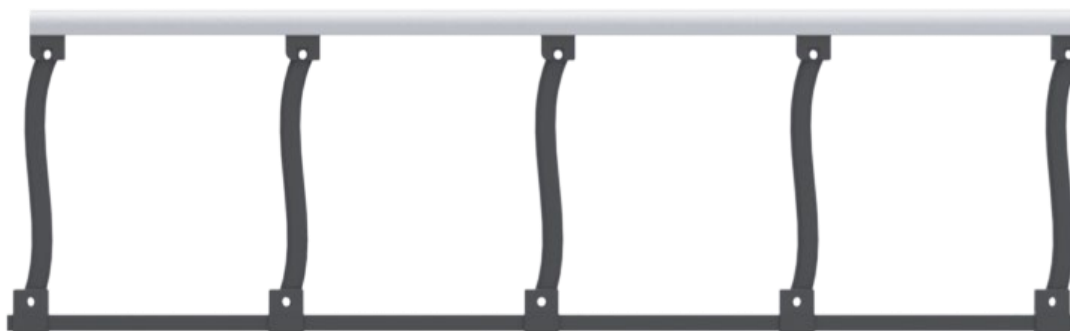

Seguro de liberación baranda.




COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$. Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex.

OPCIONES DE COLOR*

Personalice el tapizado de la colchoneta de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.



AZUL
REY



BRAVÍA
MORA



GRIS



NARANJA



NEGRO



TURQUESA



VERDE
MANZANA

* Con costo adicional. Solicite la guía de acabados completa.

* Los cambios de color pueden afectar al plazo de entrega; consulte con su ejecutivo de cuentas.

* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 10 unidades.



AJUSTE PIES

Manija retráctil fabricada en polímero de alta resistencia que permite al personal asistencial llevar la camilla a diferentes posiciones.



AJUSTE ESPALDAR

Soporte fácil, ágil y seguro para ajustar la camilla en las posiciones requeridas, facilitando la labor del personal asistencial y mejorando la experiencia del paciente.



RUEDAS Y FRENO

Fabricadas en poliuretano, libres de mantenimiento, pedales en las esquinas para activar freno, minimiza el riesgo de lesiones por caídas durante el ingreso y egreso del paciente.



AJUSTE DE ALTURA, TRENDLENBURG E INVERSO

Movimientos de mano libre asistidos por pedales en ambos lados de la camilla.

SOPORTE TANQUE OXÍGENO

Ubicado en la cubierta inferior.

QUINTA RUEDA RETRÁCTIL

Reduce el riesgo de colisión al mejorar el control en trayectorias rectas y curvas.



SOPO RTE PLACAS RAYOS - X

Porta chasis para taransporte de placas para rayos-X, se ajusta de forma fácil a diferentes tamaños, recorrido por todo el tendido.

Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos usados en hospitales como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol antiséptico.



PORTA SUERO

Graduable, plegable o desmontable.
Con cuatro ganchos de doble
servicio. Capacidad de carga 28.6 lb
(13 Kg).



PEDESTAL DOBLE

Movimientos de mano libre
asistidos por pedales en ambos
lados de la camilla.

SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio. De fácil configuración,
posiciones que aportan en el traslado, descanso, tratamiento y recuperación del paciente.



Flexión espaldar




Flexión rodillas*



Horizontal



Trendelenburg

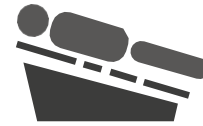

Trend. Inverso



Cambio altura

*Ver cuadro de especificaciones.

HYDRUX

EXAMEN Y RECUPERACIÓN






ERGONOMÍA Y DURABILIDAD

Ideal para ambientes hospitalarios, estructura en acero de alta resistencia y acero inoxidable, ruedas y apliques fabricados en polímero, resistente y anti bacterial; una combinación precisa de materiales para brindar soporte, confort y confiabilidad.

DIMENSIONES*

Altura mínima

Altura máxima

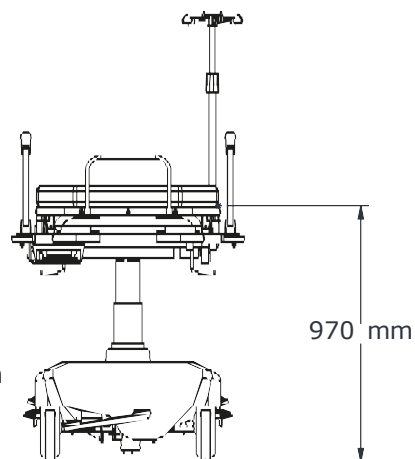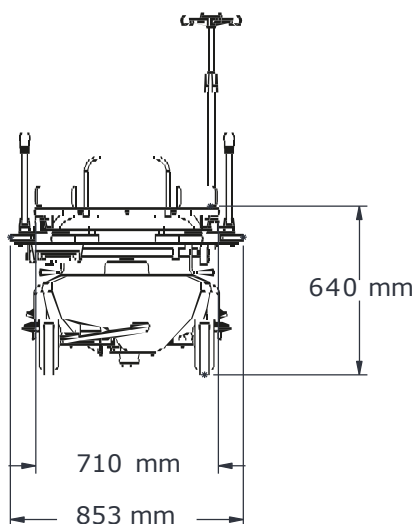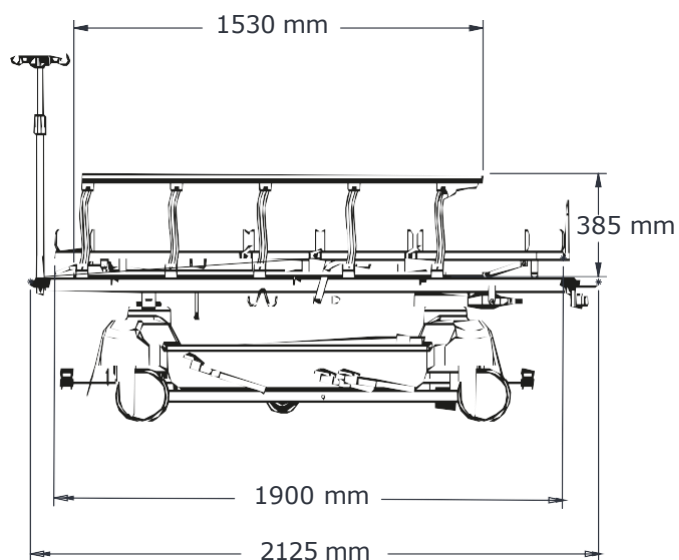

DIMENSIONES EXTERNAS*

Largo	83.6 in (2125 mm)
Ancho	33.6 in (853 mm)
Barandas	15.2 in X 60.2 in (385 mm X 1530 mm)

SUPERFICIE DEL PACIENTE*

Largo	74.8 in (1900 mm)
Ancho	27.9 in (710 mm)

MOVIMIENTOS*

Flexión espalda	0° a 90°
Flexión rodillas	0° a 40°
Altura mínima	25.2 in (640 mm)
Altura máxima	38.2 in (970 mm)
Trendelenburg	16°
Trendelenburg inverso	-16°

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*

- Capacidad de carga segura 500.4 lbs (227 Kg).
- Flexión espaldas asistido por amortiguador neumático.
- Flexión pies mecánico asistido por manivela retráctil.
- Cambio de altura, trendelenburg e inverso con operación de mano libre, asistidos por sistema hidráulico mediante pedales.
- Tendido de 4 secciones en polímero acrílico radiotransparente.
- Porta chasis integrado al marco de la camilla para transporte de placas rayos X.
- Barandilla de seguridad desmontable en sección pies.
- Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in (80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex.
- Barandas laterales de seguridad, plegables, seguro de liberación retráctil, accionamiento con una mano, al ser accionadas reposan a nivel del tendido, fabricadas en polímero de alto impacto y superficie en aluminio de fácil desinfección.
- Ruedas parachoques de caucho en las cuatro esquinas.
- Asas de empuje en los extremos de la camilla.
- Soporte para bolsa de drenaje en ambos lados de la camilla.
- Soportes para correas de sujeción en tórax y piernas.
- Porta suero plegable o graduable en acero inoxidable con 4 ganchos o receptáculos de servicio y seguro de liberación fabricados en polímero. Capacidad de carga 28.6 lb (13 Kg).
- Soportes porta suero en las esquinas de la camilla.
- Cubierta inferior termoformada y soporte para ubicar tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente.
- Ruedas en poliuretano de 8 in (203.2 mm) libres de mantenimiento.
- Quinta rueda direccional retráctil y freno centralizado asistidos por pedales en los extremos de la camilla.

FABRICACIÓN Y ACABADO*

- Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

ACCESORIOS OPCIONALES* Con costo adicional

- Porta suero inoxidable extra.
- Soporte tanque de oxígeno vertical.
- Mesa porta monitor con soporte para historia clínica.

NOTA

*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

**El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



@mubimedical - info@mubimedical.com - www.mubimedical.com

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Ingeniería	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN:
-------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------

**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

